

バッファー交換、濃縮は全自動の時代へ

BIG TUNA

- 研究者がバッファー交換濃縮に費やす時間を圧倒的に短縮
- 最終液量と濃度を自由にウェル単位で調整 (200 mg/mL*lgGまで)
- 圧倒的な回収効率 (90%以上)

- 1～96種類の異なるサンプルを個別に管理
- 0.1～192mlの幅広い容量に対応、200mg/mlまで濃縮可能
- セットアップはたった30分




UNCHAINED
LABS

タンパク質に優しい設計


N2によるプレッシャーフィльтраーション、軌道式攪拌制御、Ultrasonic volume check (非接触) により、タンパク質に安全かつ優しい設計となっております。

2種類のプレートが使用可能。一度のランで最大192mlまでバッファー交換、濃縮が可能です。組み合わせは自由自在。1ウェル毎の条件設定が可能です。

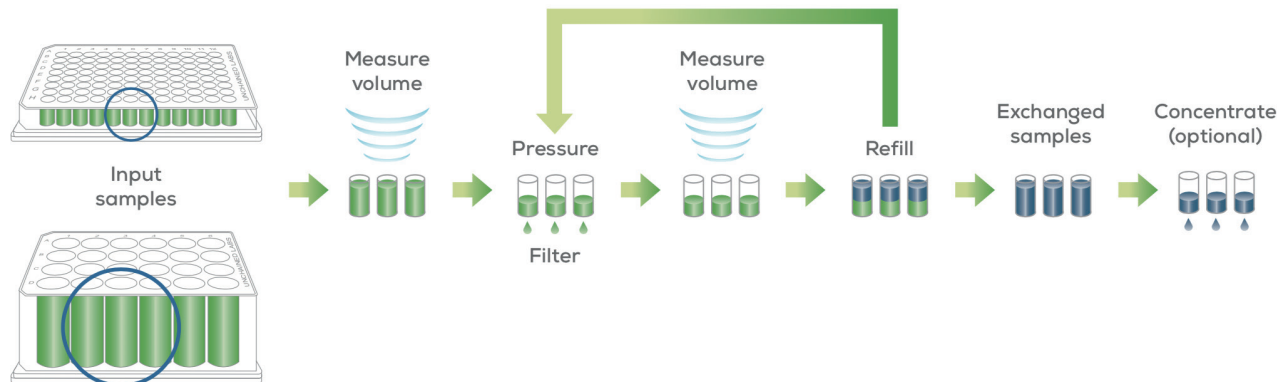

サンプル管理から進捗表示まで

専用ソフトウェアがバッファー交換、濃縮の完了目安時間をお知らせします

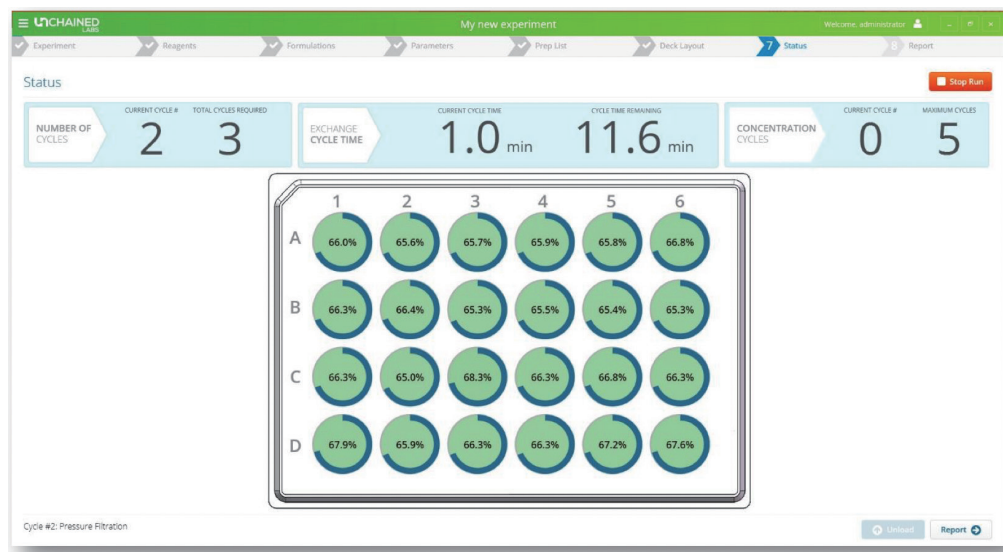

掲載されている価格は2018年4月現在の希望小売価格です（消費税は含まれておりません）。
希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。
掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。
掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

UNCHAINED
LABS

Unchained Labs 株式会社

東京都千代田区神田須田町 2-9-2 PMO 神田岩本町 3 階

TEL : 03-3526-2811 E-MAIL : info@unchainedlabs.com

<https://www.unchainedlabsjp.com/>