

JUNIOR

溶解性,結晶多形のハイスループットスクリーニング

人手では不可能だったサンプル数が1日で実施できるようになります

- ✓ 溶解性試験
- ✓ 塩、多形体、共結晶スクリーニング
- ✓ 反応スクリーニング

■ あらゆる粉体,固体,液体,溶媒を高精度で秤量,投入

適応学習アルゴリズムを使用して様々なサンプルを正確に分配し計量します



1000cpの高粘度溶媒も
スムーズに秤量,投入



さまざまな粉体,固形の
秤量,投入が可能



0.5mgから粉体秤量,
投入を可能にした技術

■ モジュールシステムを採用

さまざまなワークフローに対応可能





- 1 溶媒トレイ
- 2 加熱機能つき透析ブロック
- 3 3つのボルテックス
- 4 洗浄ステーション
- 5 加熱/冷却,攪拌
- 6 結晶化アッセンプリ
- 7 温度調整機能付きディスペンサー
- 8 温度調整機能付きシングルチップ

実際の動作動画がご覧になれます



■ 結晶解析をダイレクトに

8×12の結晶化アセンブリにより複屈折,XRD,ラマン分光法を用いて単結晶を破壊することなく分析できます

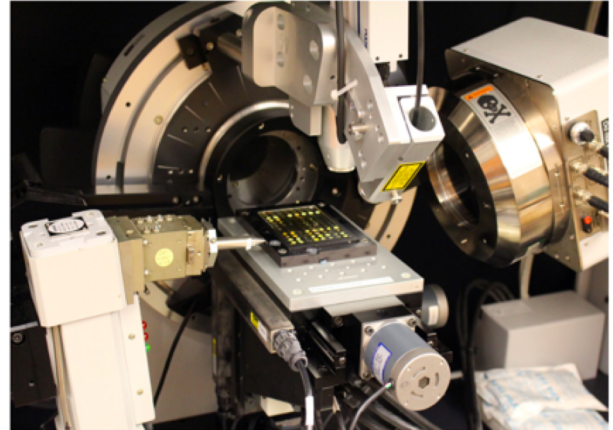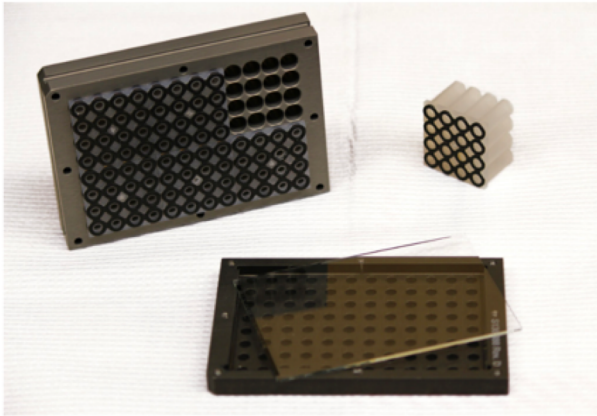

■ LEAがボトルネックを解消します

LEAはあなたの作成した実験条件、手順、分析データのすべてが完全にリンクしていますので、レポートには数字データだけでなく、実際の意思決定に必要なすべての情報が統合されます



*1: 輸送費、設置費用は別途必要になります *2: 12ヶ月のワランティが含まれております。

掲載されている価格は2018年4月現在の希望小売価格です（消費税は含まれておりません）。

希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください
掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です



UnCHAINED
LABS

Unchained labs 株式会社

東京都千代田区神田須田町2-9-2 PMO 神田岩本町3階

TEL : 03-3526-2811 E-MAIL : info@unchainedlabs.com

<https://www.unchainedlabs.jp/>